

# Bergische Universität Wuppertal

## FORTGESCHRITTENEN PRAKTIKUM

# Michelson Interferometrie

Verfasser:

Henrik JÜRGENS

Frederik STROTHMANN

Tutor:

Friedhelm Olschewski

#### Abstract:

Fourierspektroskopie mit einem Michelson Interferometer. Ziel des Versuches ist die Untersuchung von mono- als auch polychromatischer Infrarotstrahlung.

Bereich	max. %	+/0/-	erreicht %
Einleitung & Theorie	15		
Durchführung			
Auswertung	70		
phys. Diskussion			
Zusammenfassung			
Formales	15		
Note			

# Inhaltsverzeichnis

1	Ein.	leitung	2
2	$Th\epsilon$	eorie	2
	2.1	Michelson Interferometer	2
	2.2	Strahlungsintensität	3
	2.3	Schwebung	4
3	Auf	bau	5
	3.1	Pyroelektrischer Detektor	6
4	Ver	suchsdurchführung und Ergebnis	7
	4.1	Detektorspannung in Abhängigkeit der Chopperfrequenz	7
	4.2	Kalibrierung und Bestimmung der Wellenlänge des Lasers	9
		4.2.1 Kalibrierung	9
	4.3	Bestimmung der Wellenlänge des Lasers	10
	4.4	Bestimmung der Weißlichtpositon der polychromatischen Strahlung des Muffelofen	11
	4.5	Analyse des Schmalbandinterferogramms	12
	4.6	Analyse des Schwebungsinterferogramms	16
		4.6.1 Manuelle Auswertung der Schwebung	19
5	Faz	it	20
6	Anl	nang	21
	6.1	Weißlichtpunkt	21
	6.2	Weißlichtpunkt mit Schmalbandfilter	22
	6.3	Schwebung	23

# 1 Einleitung

Mit einem Michelson Interferometer soll das Infrarotstrahlungsspektrum eines He-Ne-Lasers und eines Muffelofens, welcher als Schwarzkörperstrahler verwendet wird, untersucht werden. Mithilfe von Interferenzfiltern kann das Strahlungsspektrum des Muffelofens eingegrenzt werden. Das Spektrum wird in einem Bereich von  $(3.31\,\mu\text{m})$  dicht neben der des He-Ne-Lasers  $(3.39\,\mu\text{m})$  eingeschränkt. Durch Superposition beider Strahlungsquellen entsteht das Interferenzmuster einer Schwebung, welches in diesem Versuch ebenfalls analysiert werden soll.

## 2 Theorie

Die wichtigsten theoretischen Grundlagen für den Versuch sollen zusammengefasst werden.

#### 2.1 Michelson Interferometer

Der schematische Aufbau für die Verwendung des Michelson Interferometers ist in Abbildung 2 dargestellt. Der Strahlengang im Michelson Interferometer ist in Abbildung 1 zu sehen.

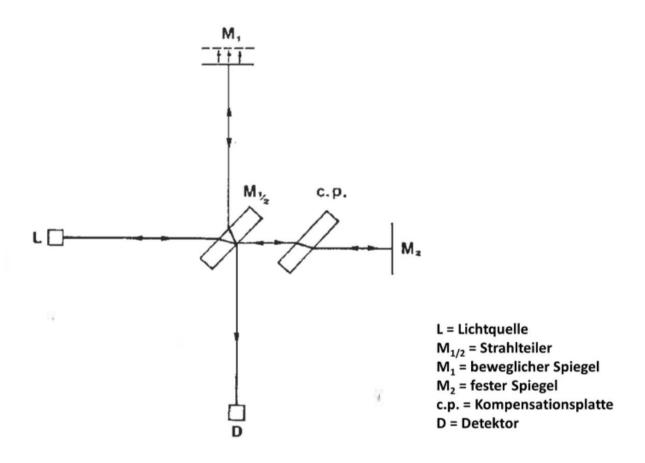


Abbildung 1: Strahlengang im Michelson Interferometer [1]

"Innerhalb des Interferometers wird die einfallende Strahlung an der Rückseite des ZnSe-

Strahlteilers auf den beweglichen Spiegel reflektiert, der über einen Hebelmechanismus von einem Getriebemotor angetrieben wird. Der Hebelmechanismus ist mit einer Mikrometerschraube versehen und überträgt den Vorschub des Antriebssystems in einem Verhältnis von ca. 5:1 auf den Spiegel. Mikrometerschraube und Getriebemotor sind über eine Achse miteinander verbunden, auf der ein Drehgeber befestigt ist, der die Messwertaufnahme des verwendeten LabView-Programms steuert. Die zum festen Interferometerspiegel durch die ZnSe-Strahlteilerplatte und eine ZnSe-Kompensationsplatte transmittierte Strahlung interferiert nach Reflexion am Spiegel an der strahlteilenden Schicht mit dem vom beweglichen Spiegel reflektierten Strahlungsanteil und wird mit einer CaF2 -Linse auf eine pyroelektrischen Detektor fokussiert." (Zitat [1] Seite 2, Kapitel 4 Messaufbau Zeile 8ff.) Die Bedingung für konstruktive bzw. destruktive Interferenz ergibt sich aus dem Gangunterschied, welcher durch die Verschiebung des beweglichen Spiegels eingestellt werden kann. Das Licht durchläuft den Gangunterschied  $\delta_l$  zweimal, sodass sich die Beziehungen 1 und 2 für konstruktive bzw. destruktive Interferenz ergeben.

$$n\lambda = 2\delta_l \,, \ n \in \mathbb{N}_0 \tag{1}$$

$$\left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda = 2\delta_l \;, \; n \in \mathbb{N}_0 \tag{2}$$

Bei der Bestimmung von  $\delta_l$  muss die Übersetzung der Mikrometerschraube beachtet werden. Wenn man für  $\delta_l$  den Abstand  $\Delta S$ , der auf der Mikrometerschraube abgelesen werden kann, verwendet, muss also ein Übersetzungsfaktor k berücksichtigt werden. Die sich daraus ergebenden Formeln zur Bestimmung der Wellenlänge bei konstruktiver und bei destruktiver Interferenz ergeben sich mit Gleichung 3 und 4.

$$\lambda = \frac{2\delta_l}{nk} \tag{3}$$

$$\lambda = \frac{2\delta_l}{nk} \tag{3}$$

$$\lambda = \frac{2\delta_l}{(n+\frac{1}{2})k} \tag{4}$$

#### 2.2 Strahlungsintensität

Der Zusammenhang zwischen der Intensität I und  $\delta_l$  kann [2] entnommen werden. Für monochromatische Strahlung ergibt sich Gleichung 5.

$$I(\delta_l) = \frac{I(1/\lambda)}{2} \left( 1 + \cos\left(\frac{2\pi\delta_l}{\lambda}\right) \right) \tag{5}$$

Unter Vernachlässigung des konstanten Offsets, sowie unter Berücksichtigung von Strahlungsverlusten erhält man daraus Gleichung 6.

$$I(\delta_l) = B(1/\lambda) \cos\left(\frac{2\pi\delta_l}{\lambda}\right) \tag{6}$$

Nach Integration über alle Wellenzahlen  $(1/\lambda)$  (Gleichung 7) erhält man die Intensität von polychromatischem Licht  $I_{poly}$  in Abhängigkeit des Gangunterschiedes.

$$I(\delta_l)_{poly} = \int_0^\infty d(1/\lambda)B(1/\lambda)\cos\left(\frac{2\pi\delta_l}{\lambda}\right)$$
 (7)

Aus der Fourierrücktransformation kann die Spektralverteilung  $B(1/\lambda)$  nach Gleichung 8 bestimmt werden.

$$B(1/\lambda) = 2 \int_0^\infty d\delta_l I(\delta_l)_{poly} \cos\left(\frac{2\pi\delta_l}{\lambda}\right)$$
 (8)

Als Ansatz für die spätere Analyse des Interferogramms mit Schmalbandfilter kann für  $B(1/\lambda)$  eine Gaussfunktion verwendet werden. Für I wird dabei eine modulierte Gaussfunktion angenommen. Es ergibt sich die in Gleichung 9 beschriebene Beziehung, wobei  $b=1/\lambda_{max}$  die Wellenzahl ( bis hierhin immer in Einheiten von  $2\pi$  ) maximaler Transmission ist und 2a die 1/e-Breite des Filters ist.

$$B(1/\lambda) = \frac{a\sqrt{\pi}}{2} \exp\left(-\frac{(a2\pi(b-1/\lambda))^2}{4}\right) \tag{9}$$

#### 2.3 Schwebung

Der Begriff 'Schwebung' bezeichnet die Überlagerung zweier Schwingungen, sodass eine einhüllende niedrigfrequente Schwingung der Wellenlänge  $\lambda_+$  und eine hochfrequente Schwingung der Wellenlänge  $\lambda_-$  sich herausbilden. Besonders gut kann dies an Schwingungen beobachtet werden, deren Wellenlängen nahe beieinander liegen und deren Amplitude gleich groß ist. Als Schwebungsfrequenz wird die Frequenz der einhüllenden Schwingung bezeichnet. Allgemein ist dies eine Charakterisierung der Additionstheoreme für Sinus und Cosinus. Der Zusammenhang ist in Gleichung 10 dargestellt, wobei  $k_i$  in diesem Fall die Wellenzahl  $2\pi/\lambda_i$  bezeichnet.

$$\cos(k_1x+a) + \cos(k_2x+b) = 2\cos\left(\frac{k_1+k_2}{2}x + \frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{k_1-k_2}{2}x + \frac{a-b}{2}\right)$$
(10)

Die beiden Wellenlängen  $\lambda_+$  und  $\lambda_-$ , die sich daraus ergeben, sind in Gleichung 11 und 12 angegeben.

$$\lambda_{+} = \frac{2\lambda_{1}\lambda_{2}}{\lambda_{1} + \lambda_{2}} \tag{11}$$

$$\lambda_{-} = \frac{2\lambda_{1}\lambda_{2}}{\lambda_{1} - \lambda_{2}} \tag{12}$$

Andersherum ergeben sich die Beträge von  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$  aus  $\lambda_+$  und  $\lambda_-$  aus Gleichung 13 und 14:

$$\lambda_1 = \frac{\lambda_+ \lambda_-}{\lambda_+ - \lambda_-} \tag{13}$$

$$\lambda_2 = \frac{\lambda_+ \lambda_-}{\lambda_+ + \lambda_-} \tag{14}$$

Die Spektralverteilung  $B(1/\lambda)$  erhält man wieder aus der Annahme einer (schwebungs-)modulierten Gaussfunktion für I. Es ergeben sich zwei Gaußfunktionen, welche in Gleichung 15 angegeben sind. (vgl. [2])

$$B(1/\lambda) = \frac{a\sqrt{\pi}}{4} \left[ \exp\left(-\frac{\left[a2\pi(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_{+}} - \frac{1}{\lambda_{-}})\right]^{2}}{4}\right) + \exp\left(-\frac{\left[a2\pi(\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\lambda_{+}} - \frac{1}{\lambda_{-}})\right]^{2}}{4}\right) \right]$$
(15)

## 3 Aufbau

Eine Skizze des Aufbaus ist in Abbildung 2 zu sehen. Das Michelson-Interferometer besteht aus einem Strahlteiler, der den eintreffenden Strahl in zwei Teilstrahlen teilt. Die Teilstrahlen werde jeweils von einem Spiegel reflektiert. Einer der der beiden Spiegel kann über einen Hebelmechanismus, durch einem Elektromotor mit nahezu konstanter Geschwindigkeit bewegt werden. Der reflektierte Strahl wird durch eine CaF<sub>2</sub>-Sammellinse auf eine pyroelektrischen Detektor geworfen. Der Detektor wandelt den Strahl in eine Spannung proportional zur Intensität des Strahls um. Die Spannung wird mit einem Lock-In-Verstärker bearbeitet und über ein AD-Box an den Computer weitergeleitet. Am Computer wird aus dem Signal mit der Software Lab-View ein Interferogramm visualisiert. Das Übersetzungsverhältnis k des Hebelmechanismus, für den Gangunterschied liegt bei ca. 5 (Quelle:[2]). Da der Teilstrahl, der auf den bewegten Spiegel trifft das Medium des Strahlteilers drei mal durchqueren muss, wird zwischen dem Strahlteiler und dem festem Spiegel noch ein Kompensationsplättchen angebracht. Als Strahlenquelle wird ein HeNe-Laser und ein Muffelofen verwendet. Der Laser hat eine Wellenlänge von  $3.39 \,\mu\mathrm{m}$ , der Muffelofen und der Laser können über den Folienspiegel gekoppelt werden. Zwischen dem Muffelofen und dem Folienspiegel ist ein Chopper eingebaut, der die Spannung des Detektors regelt. Durch den Chopper registriert der Detektor immer die Temperatur- und Strahlungsänderung (Untergrund) und die zu messende Strahlung (mit Untergrund) abwechselnd. Die Trennung der beiden Signal wird mittels eines phasenempfindlichen Lock-In-Verstärker und eines anhand Referenzsignals vorgenommen. Der Muffelofen kann bis 900°C erhitzt werden, die dabei emittierte Strahlung durch eine Blende kollimiert. Es kann ein Schmalbandfilter verwendet werden, um die Wellenlänge der Strahlung aus dem Muffelofen auf ca.  $3.31 \,\mu\mathrm{m}$  zu begrenzen.

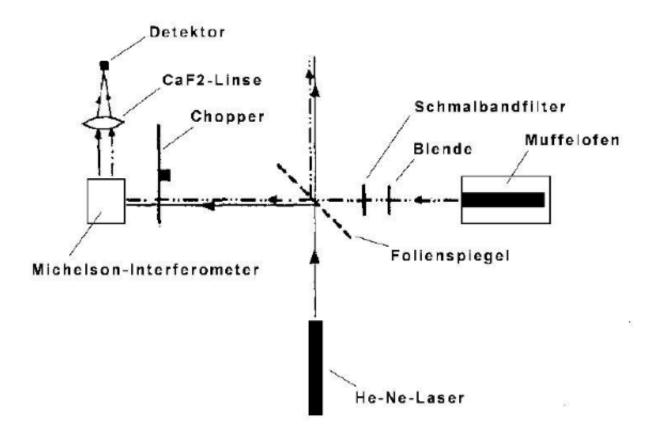


Abbildung 2: Aufbau des Experimentes [1]

# 3.1 Pyroelektrischer Detektor

Pyroelektrische Detektoren (vgl. [3]) bestehen aus ferroelektrischen Kristallen oder Keramiken mit unsymmetrischer Gitterstruktur, deren Gitterabstände sich bei Erwärmung durch IR-Stahlung verändern. Das Meterial hat dadurch temperaturabhängige Dipolmomente, welche es polarisieren. Die Änderung der Polarisation resultiert in einem elektrischen Signal, welches für Temperaturen im Bereich der Raumtemperatur näherungsweise proportional zur Änderung der Strahlungsleistung ist. Der schematische Aufbau ist in Abb. 3 dargestellt. In diesem Versuch ist die Detektorspannung abhängig von der Chopperfrequenz, welche die einfallende Strahlung periodisch unterbricht. Bei hoher Chopperfrequenz wird die Spannung kleiner.

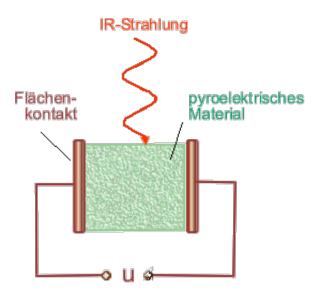


Abbildung 3: Aufbau eines pyroelektrischen Detektors [3]

# 4 Versuchsdurchführung und Ergebnis

#### 4.1 Detektorspannung in Abhängigkeit der Chopperfrequenz

Zuerst soll der Zusammenhang zwischen der Detektorspannung U und der Chopperfrequenz f untersucht werden. Die Chopperfrequenz wird im Bereich von 10Hz bis 50Hz variiert. Bei Werten unter 10Hz ist die Schwankung der Werte zu groß, so dass die Signale nicht vom Untergrund unterschieden werden können. Die Detektorspannung wird am Lock-In-Verstärker abgelesen. Es wurde ein Fehler von 40-10 mV angenommen, je nach Schwankung der Nadel. Der Plot der Messdaten mit linearen Achsen ist in Abbildung 4 zu sehen. In Abbildung 5 sind die Messdaten mit doppelt logarithmischen Achsen geplottet. Da ein linearer Zusammenhang zwischen log(U) und log(f) zu sehen ist, werden die Messdaten mit Gleichung 16 gefittet.

$$U(f) = \exp[A \cdot \log(f) + B] \tag{16}$$

Dabei sind A und B freie Parameter, die durch den Fit bestimmt werden. Das Ergebnis des Fits ist in Tabelle 1 zu sehen.

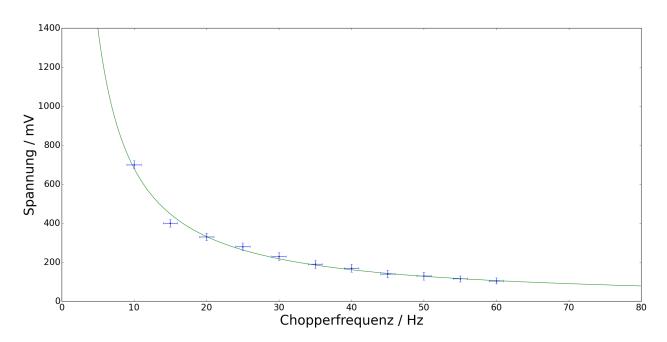


Abbildung 4: Spannung in Abhängigkeit der Chopperfrequenz mit linearen Achsen

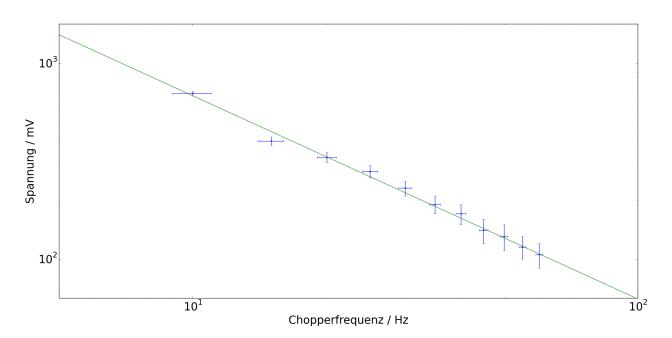


Abbildung 5: Spannung in Abhängigkeit der Chopperfrequenz mit logarithmischen Achsen

Tabelle 1: Fitparameter für den Fit der Spannung in Abhängigkeit der Chopperfrequenz nach Gleichung 16

Parameter	Wert
A	-1,03(3)
В	8,89(8)
$\chi^2_{red}$	1,22

Das  $\chi^2_{red}$  von 1,22 spricht dafür, das der Zusammenhang zwischen der Chopperfrequenz und der Spannung gut durch das Modell beschrieben wird. Bei kleine Frequenzen erreicht der De-

tektor eine Sättigung. Aus der bestimmten Parameter A folgt, dass die Spannung proportional zu 1/f ist. Für die folgenden Versuchsteil wird eine Chopperfrequenz von 30Hz verwendet.

#### 4.2 Kalibrierung und Bestimmung der Wellenlänge des Lasers

In diesem Abschnitt soll das Übersetzungsverhältnis zwischen Schraube und Spiegel und die Wellenlänge des Lasers bestimmt werden. Zuvor muss noch die x-Position in Lab-View und der Millimeterschraube geeicht werden.

#### 4.2.1 Kalibrierung

Die x-Werte in Lab-View müssen den realen Positionen der Millimeterschraube zugeordnet werden. Bei der Bestimmung wird von einem linearem Zusammenhang ausgegangen. Für die Kalibrierung wird die Schraube gedreht, dabei wird in regelmäßigen Abständen die Position im Interferogramm mit Lab-View aufgenommen. Der Fehler der Schraubenposition wird mit  $5\mu$ m angenommen (eine halbe Skaleneinheit). Für den Fit wurde Gleichung 17 verwendet, A beschreibt dabei die Steigung und B das Offset. Der ist in Abbildung 6 zu sehen. Aus dem Fit ergebe sich die Parameter in Tabelle 2.

$$S(x) = A \cdot x + B \tag{17}$$

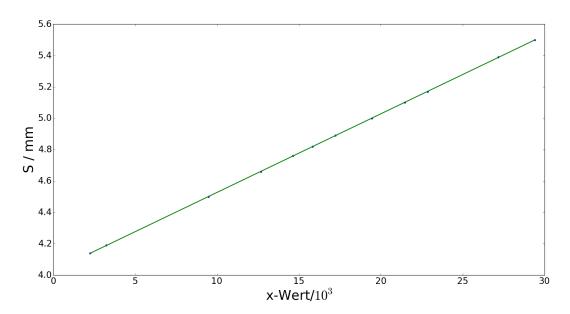


Abbildung 6: Linearer Fit für den Zusammenhang zwischen Kanal in Lab-View und der Position der Millimeterschraube. Die Fehler der Messpunkte sind so klein, dass sie nicht zu erkennen sind.

Tabelle 2: Parameter aus dem Fit für den Zusammenhang zwischen Kanal in Lab-View und der Position der Millimeterschraube

Parameter	Wert
A / mm	5.009(8)e-05
B / mm	4.0263(9)
$\chi^2_{red}$	0.78

#### 4.3 Bestimmung der Wellenlänge des Lasers

Mit der zuvor durchgeführten Kalibrierung kann nun die Wellenlänge  $\lambda$  des Lasers bestimmt werden. Die Wellenlänge wird aus dem Gangunterschied s, der Anzahl der Interferenzmaxima n und dem Übersetzungsverhältnis k bestimmt. Für das Übersetzungsverhältnis wird ein Wert von k=5 angenommen. Die Wellenlänge ergibt sich nach Gleichung 18.

$$\lambda = \frac{2s}{kn} \tag{18}$$

Das aufgenommen Interferogramm ist in Abbildung 7 zu sehen.

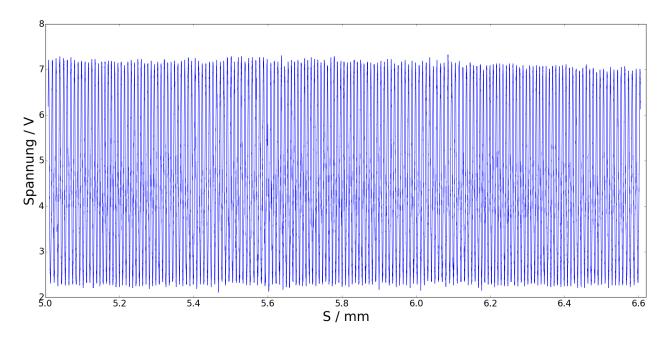


Abbildung 7: Interferogramm des Lasers. Es wurden 173 Peaks aufgenommen

Mit der zuvor durchgeführten Kalibrierung wird der Gangunterschied der x-Position in eine reelle Wegdifferenz umgerechnet, der Fehler ergibt sich nach Fehlerfortpflanzung auf die Geradengleichung. Die Anzahl der Maxima wurde als Fehlerlos angenommen. Die Messdaten sind in Tabelle 3 eingetragen. Aus den bestimmten Wellenlängen ergibt sich ein Mittelwert von  $3.732(9)~\mu m$ .

Um ein besseres Ergebnis zu erhalten, wird das eigentliche Übersetzungsverhältnis  $k_e$  mit Gleichung 19 bestimmt. Dabei wurde für  $\lambda$  der Literaturwert von 3,39 $\mu$ m verwendet (vgl. 19).

Tabelle 3: Messergebnisse für die Bestimmung der Wellenlänge

n	$x_1 / mm$	$x_2 / mm$	s / mm	$\lambda / \mu m$
173	5.0088(3)	6.6040(3)	1.5952(4)	3.688(9)
172	5.0107(3)	6.6040(3)	1.5933(4)	3.705(9)
171	5.0127(3)	6.6040(3)	1.5913(4)	3.722(9)
170	5.0151(3)	6.6040(3)	1.5889(4)	3.738(9)
169	5.0493(3)	6.6040(3)	1.5547(4)	3.739(9)
168	5.0589(3)	6.6040(3)	1.5451(4)	3.742(9)
167	5.0689(3)	6.6040(3)	1.5351(4)	3.743(9)
166	5.0784(3)	6.6040(3)	1.5256(4)	3.746(9)
165	5.0884(3)	6.6040(3)	1.5159(4)	3.746(9)
164	5.0975(3)	6.6040(3)	1.5600(4)	3.752(9)

Der korrigierte Übersetzungsfaktor ergibt sich mit 5.42(1). In den nachfolgenden Versuchsteilen wird das korrigierte Übersetzungsverhältnis verwendet.

$$k_e = \frac{2s}{n\lambda} \tag{19}$$

# 4.4 Bestimmung der Weißlichtpositon der polychromatischen Strahlung des Muffelofen

Bei weißem Licht gibt es nur an der Weißlichtposition konstruktive Interferenz, da an dieser Positon der Gangunterschied gleich 0 ist. Die Weißlichtposition des Muffelofen liegt also in Abhängigkeit der Spiegelpostion dort, wo die Intensität maximal wird. Neben der Weißlichtposition kann von einer Gleichverteilung zwischen konstruktiver- und destruktiver Interferenz ausgegangen werden. Bei der Suche nach dem Weißlichtpunkt wurden zwei Kandidaten gefunden.

Der erste Weißlichtpunkt wurde bei 4,7545(80) mm gefunden, siehe Abbildung 8. Der zweite Weißlichtpunkt wurde bei 5,770(3) mm gefunden, sieh Abbildung 9. Die Herkunft des zweiten Weißlichtpunktes ist nicht bekannt.

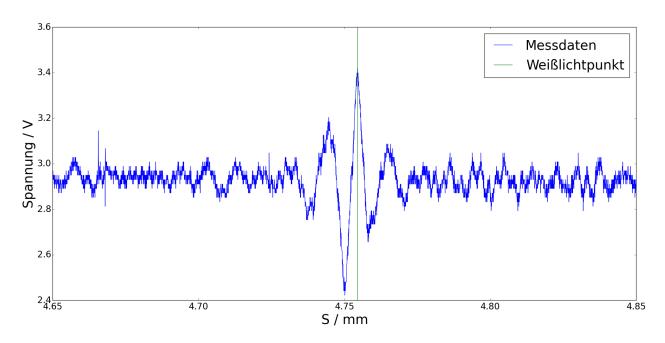


Abbildung 8: Erster bestimmter Weißpunkt bei 4,755(8) mm

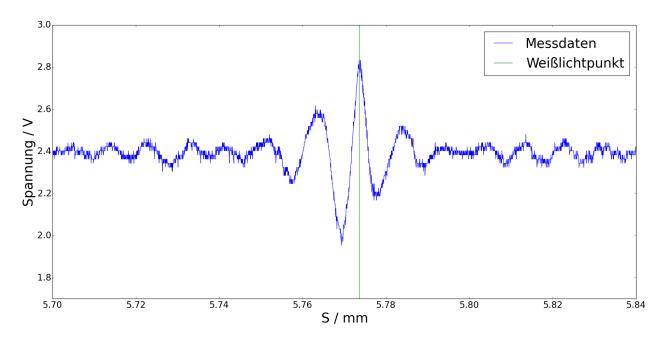


Abbildung 9: Zweiter bestimmter Weißpunkt bei 5,770(3) mm

Die beiden Plots, für die Eichung des Abstandes und die Tabellen mit den Parametern sind im Anhang in Abschnitt 6.1 zu finden.

# 4.5 Analyse des Schmalbandinterferogramms

Der Wellenlängenbereich des Muffelofen wird mit einem Schmalbandfilter reduziert. Da durch die Filterung auch die Intensität verringert wird, muss die Verstärkung des Lock-In-Verstärkers korrigiert werden. Aufgrund des Filters wird eine gedämpfte Cosinus-Schwingung symmetrisch um den Weißlichtpunkt des Muffelofen erwartet. Aus dem aufgenommen Interferogramm soll die Wellenlänge der maximalen Transmission und die Breite des 1/e-Abfalls der Einhüllenden

bestimmt werden. Mit dem Wert kann die Breite des Schmalbandfilters bestimmt werden. Das Interferogramm ist in Abbildung 10 zu sehen.

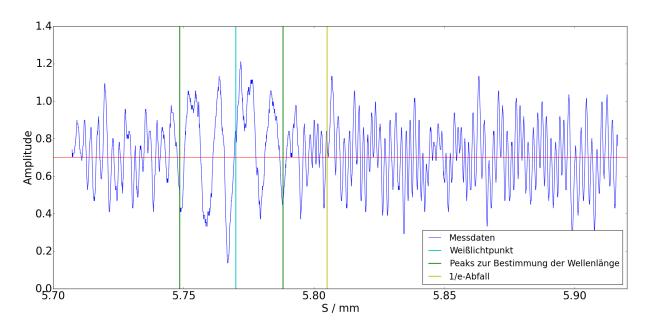


Abbildung 10: Interferogramm für den Muffelofen mit Schmalbandfilter. Die grünen Linien markieren den Bereich für die Bestimmung der Wellenlänge, die rote Linie markiert die Nulllage

Aus den Interferogramm ergeben sich die Werte in Tabelle 4. Es wurde ein kleines Intervall um den Weißlichtpunkt gewählt (grüne Striche), da in diesem Bereich die Abstände zwischen den Peaks regelmäßig sind. Aus den Werten ergibt sich eine Wellenlänge von  $2.91(5)\mu$ m, welche um ca. 12% vom Literaturwert von  $3.31\mu$ m abweicht (Quelle:[2]). Mit diesem Wert lässt sich der Parameter  $2\pi b$  aus Gleichung 9 bestimmen .

$$2\pi b = \frac{2\pi}{\lambda} = 2.159(4) \frac{1}{\mu m} \tag{20}$$

Tabelle 4: Messwerte für die Bestimmung der Wellenlänge

$x_1 / mm$	$x_2 / mm$	S / mm	n
5,7485(3)	5,7881(3)	0,0396(4)	5

Für die Bestimmung des 1/e-Abfalls wird die Position des Weißlichtpunkts verwendet. Die Amplitude am Weißlichtpunkt beträgt ca. 0.57. Aus der Amplitude ergibt sich der 1/e-Abfall bei einer Position von 5.805(3) mm mit einer Amplitude von 0.208. Es ergibt sich eine halbe Breite des 1/e-Abfalls von 0.035(2) mm. Der Parameter a hat somit den Wert

$$a = 0.0129(1) \,\mathrm{mm}$$
 (21)

Aus den Werten lässt sich die Spektralverteilung des Filters bestimmen. Die Wellenzahlen

 $(\bar{\nu}_i = 2\pi/\lambda_i)$  ergeben sich mit:

$$\bar{\nu}_1 = 2\pi b - \frac{2}{a} = 2.003(4)\mu m^{-1}$$
 (22)

$$\bar{\nu}_1 = 2\pi b - \frac{2}{a} = 2.003(4)\mu m^{-1}$$

$$\bar{\nu}_2 = 2\pi b + \frac{2}{a} = 2,314(4)\mu m^{-1}$$
(22)

Aus den beiden Werten  $\bar{\nu}_1$  und  $\bar{\nu}_2$  lässt sich nach [2] die  $e^{-1}$ -Breite  $\Delta\lambda$  des Schmalbandfilters bestimmen.

$$\Delta \lambda = \frac{1}{\bar{\nu_1}} - \frac{1}{\bar{\nu_2}} = 0.067(8) \,\mu\text{m} \tag{24}$$

Erwartet wurde ein Wert von  $0.060\,\mu\mathrm{m}$  [2]. Der Bestimmte Wert weicht nur um ca. 12% vom erwarteten Wert ab, sodass diese Messung als gut angesehen werden kann. Aus den beiden Parametern a und b ergibt sich die Spektralverteilung des Filters in Abbildung 11.

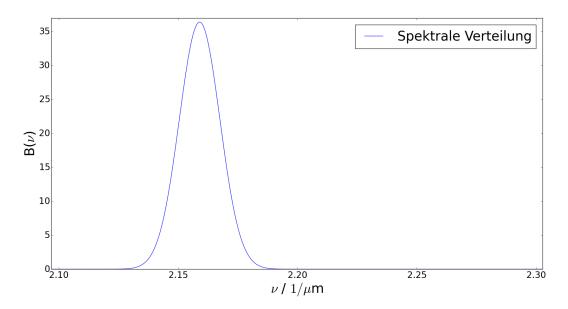


Abbildung 11: Spektrale Verteilung des Schmalbandfilters

Zum Schluss soll erwähnt werden, dass bei Anwendung einer FFT, eines Algorithmusses für die diskrete Fouriertransformation, ein ähnliches Ergebnis zustande kommt. Da die FFT für periodische Signale geeignet ist, kann zur Rauschunterdrückung eine sogenannte Fensterfunktion verwendet werden, welche das Signal 'sanft' ein und ausblendet. Das FFT-Spektrum ohne Fensterfunktion ist in Abbildung 12 dargestellt.


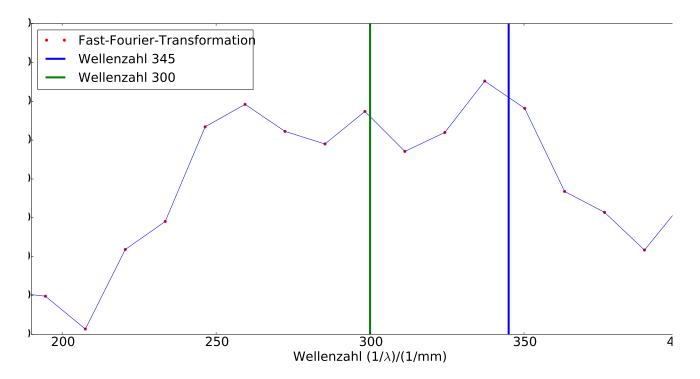


Abbildung 12: Diskrete Fouriertransformation des Filterinterferogramms für Wellenzahlen  $(1/\lambda)$  von  $200\frac{1}{mm}$  bis  $400\frac{1}{mm}$  ohne Fensterfunktion (verrauscht)

Man sieht, dass die Wellenzahl 300(2)  $\frac{1}{mm}$  im Spektrum vertreten ist, welche einer Wellenlänge von  $3.33(2)\,\mu\mathrm{m}$  entspricht. Beim ein und Ausblenden des Signals mit den Funktionen  $f(x) = (\frac{1-\cos(\frac{2\pi x}{L})}{2})$  und  $f(x) = (\frac{1-\cos(\frac{2\pi x}{L})}{2})^4$ , um das Rauschen durch die Nichtperiodizität zu unterdrücken, wird diese Wellenzahl jedoch herausgefiltert. Die beiden Spektren, welche durch Anwendung der beiden Filterfunktionen entstehen, sind in den Abbildungen 13a und 13b dargestellt.

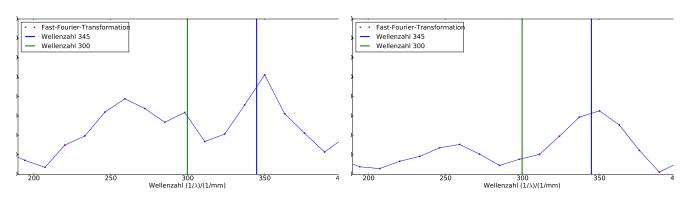

(a) Diskrete Fouriertransformation des Filterinterferogramms für Wellenzahlen  $(1/\lambda)$  von  $200 \frac{1}{mm}$  bis  $400 \frac{1}{mm}$  mit Fensterfunktion  $f(x) = (\frac{1-\cos(\frac{2\pi x}{L})}{2})$ 

(b) Diskrete Fourier transformation des Filterinterferogramms für Wellenzahlen  $(1/\lambda)$  von  $200\,\frac{1}{mm}$  bis  $400\,\frac{1}{mm}$  mit Fensterfunktion  $f(x)=(\frac{1-\cos(\frac{2\pi x}{L})}{2})^4$ 

Man sieht, dass der größte Peak, mit der Fensterfunktion  $f(x) = (\frac{1-\cos(\frac{2\pi x}{L})}{2})^k$  (k=1,4) bei einer Wellenzahl von 345(2)  $\frac{1}{mm}$  liegt, was einer Wellenlänge von 2.90(2)  $\mu$ m entspricht. Diese stimmt mit der manuell bestimmten Wellenlänge von 2.91(5)  $\mu$ m zu 99.7% überein. Dieses Ergebnis spricht für die Konsistenz der manuellen Messung.

#### 4.6 Analyse des Schwebungsinterferogramms

In diesem Versuchsteil soll die Schwebung zweier nahe beieinander liegender Signale untersucht werden. Die verwendeten Wellenlängen liegen bei  $3.31\,\mu\mathrm{m}$  (Muffelofen mit Filter) und  $3.39\,\mu\mathrm{m}$  (He-Ne-Laser). Um die Schwebung sichbar zu machen, musste die Amplitude des He-Ne-Lasers an die Amplitude des gefilterten Muffelofenspektrums angepasst werden. Dazu wurden Polyethylenfolien in den Strahlengang des Lasers montiert, welche zur Feinjustierung verkippt werden konnten. Die Eichung wurde für diese Messung wie in Abschnitt 4.2.1 durchgeführt. Der Plot für die Eichung und die Fitfunktion ist im Anhang Abschnitt 6.3 zu finden. Das Interferogramm zur Analyse der Schwebung ist in Abbildung 14 zu sehen.

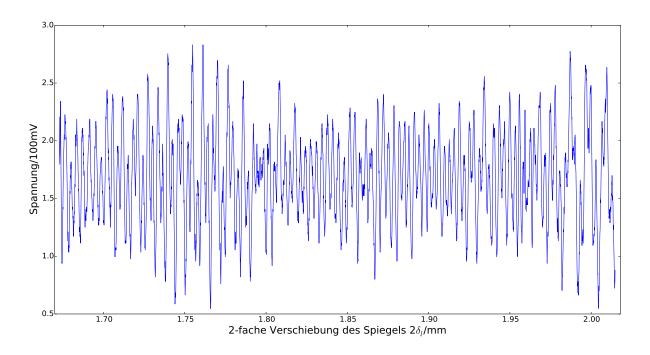


Abbildung 14: Schwebungsinterferogramm

Da die Wellenlänge der in dem Interferogramm erkennbaren Schwebung sehr stark von der erwarteten Schwebungswellenlänge abweicht, wird es hier vorgezogen, einen FFT-Algorithmus (Fast-Fourier-Transform) für die diskrete Fouriertransformation zu verwenden, um herauszufinden, welche Wellenzahlen  $(1/\lambda)$  in dem Interferogramm vertreten sind. Auf eine Herleitung der DFT und deren Anwendung in der Analyse von Daten wird verzichtet, da dies lediglich einer Diskretisierung der Fouriertransformation entspricht, wodurch 'gesamplete' Messdaten und deren Frequenzen analysiert werden können. Die diskrete Fouriertransformation ist für die Analyse periodischer Signale geeignet, sodass bei der Analyse nichtperiodischer Signale hochfrequente Anteile in der Fouriertransformation hinzukommen, welche in den niedrigfrequenten Bereich gespiegelt werden, da  $f(t) = e^{2\pi int/N}$  keine reelle Funktion ist. Dadurch sind die Daten nach der FFT stark verrauscht. Diese sind in Abbildung 15 dargestellt.

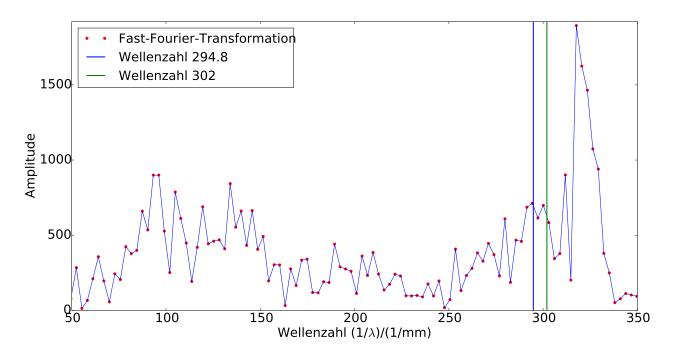


Abbildung 15: Diskrete Fouriertransformation des Schwebungsinterferogramms für Wellenzahlen  $(1/\lambda)$  von  $50\frac{1}{mm}$  bis  $350\frac{1}{mm}$  ohne Fensterfunktion (verrauscht)

Um die vertretenen Wellenzahlen aus dem Interferogramm abzulesen, wurde der Bereich  $260\frac{1}{mm}$  bis  $315\frac{1}{mm}$  näher untersucht. Dieser ist in Abbildung 16 zu sehen.

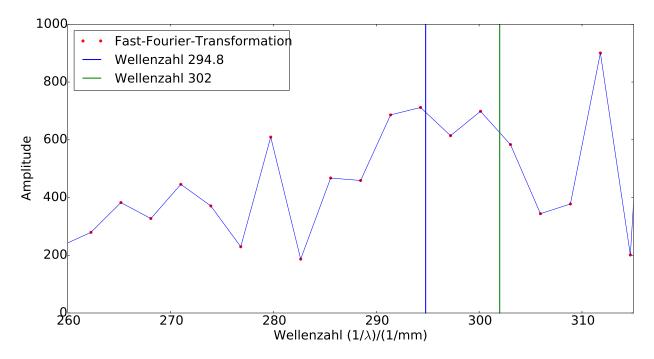


Abbildung 16: Diskrete Fouriertransformation des Schwebungsinterferogramms für Wellenzahlen  $(1/\lambda)$  von  $260\frac{1}{mm}$  bis  $315\frac{1}{mm}$  ohne Fensterfunktion (verrauscht)

Man sieht, dass die Wellenzahlen 294.8(10)  $\frac{1}{mm}$  und 302(2)  $\frac{1}{mm}$ , welche den Wellenlängen 3.392(12)  $\mu$ m und 3.31(2)  $\mu$ m entsprechen, in dem Interferogramm vertreten sind. Diese weichen

von den erwarteten Wellenlängen 3.31  $\mu$ m und 3.39  $\mu$ m um 0 % bzw. 0.05 % ab. Daneben sind andere Frequenzen stärker in dem Interferogramm vertreten. Um herauszufinden, ob diese durch die Nichtperiodizität zustandekommen, multipliziert man sogenannte Fensterfunktionen mit dem Interferogramm, welche das Signal 'sanft' ein und ausblenden. In diesem Fall wurde die Funktion  $f(x) = (\frac{1-\cos(\frac{2\pi x}{L})}{2})^k$ , wobei L die Länge des Interferogramms ist und k eine natürliche Zahl, als Fensterfunktion gewählt. Dadurch wird das Signal periodisch und das Rauschen durch Randeffekte kleiner. Abhängig von der Größe k, wirde der mittlere Teil des Interferogramms unterschiedlich stark gewichtet. Deshalb wurden für k die Werte 1, 4 und 10 eingesetzt. Die Spektren für den Wellenzahlbereich von  $50\frac{1}{mm}$  bis  $350\frac{1}{mm}$  sind in Abbildung 17 (k=1), 18a (k=4) und 18b (k=10) dargestellt.



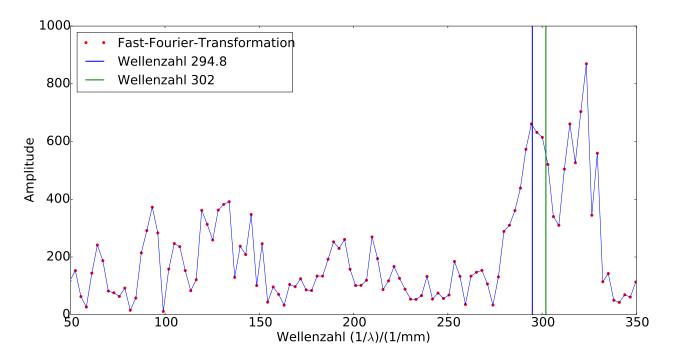


Abbildung 17: Diskrete Fouriertransformation des Schwebungsinterferogramms für Wellenzahlen  $(1/\lambda)$  von  $50\frac{1}{mm}$  bis  $360\frac{1}{mm}$  mit Fensterfunktion  $f(x)=(\frac{1-\cos(\frac{2\pi x}{L})}{2})$ 

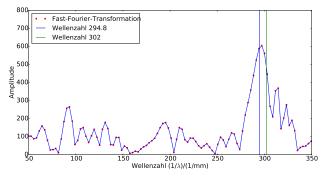

(a) Diskrete Fourier transformation des Schwebungsinterferogramms für Wellenzahlen  $(1/\lambda)$  von  $50\frac{1}{mm}$  bis  $360\frac{1}{mm}$  mit Fenster funktion  $f(x)=(\frac{1-\cos(\frac{2\pi x}{L})}{2})^4$ 

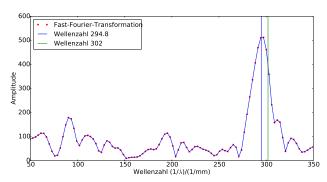

(b) Diskrete Fourier transformation des Schwebungsinterferogramms für Wellenzahlen  $(1/\lambda)$  von  $50\,\frac{1}{mm}$  bis  $360\,\frac{1}{mm}$  mit Fenster funktion  $f(x)=(\frac{1-\cos(\frac{2\pi x}{L})}{2})^{10}$ 

Man sieht, dass das Rauschen mit höherem k geringer wird, sodass die erwarteten Wellenzahlen bereits bei k=4 die größte Amplitude im gesamten Interferogramm besitzen. Die beiden Peaks bei  $294.8(10) \frac{1}{mm}$  und  $302(2) \frac{1}{mm}$  verschmieren mit größer werdendem k zu einem Peak, sodass bei k=10 die Peaks nichtmehr voneinander unterschieden werden können. Trotzdem sieht man, dass das Rauschen bei k=10 am besten unterdrückt wird, sodass andere Wellenzahlen eine sehr geringe Amplitude besitzen. Daneben kann man Infrarotwellenzahlen von Plankstrahlern bei Raumtemperatur bei ca.  $100 \frac{1}{mm}$  in den letzten beiden Plots gut erkennen, welche ebenfalls nicht als Rauschen herausgefiltert werden. Diese Tatsache unterstützt die Konsistenz dieses Resultates. Zusammenfassend konnten die gefundenen Wellenlängen bei  $3.392(12) \, \mu \mathrm{m}$  und  $3.31(2) \, \mu \mathrm{m}$  per FFT mit relativ großer Genauigkeit durch die Benutzung von Fensterfunktionen bestimmt werden, wobei der Peak bei der Wellenlänge  $3.31(2) \, \mu \mathrm{m}$  abhängig von der Fensterfunktion nicht mehr zu erkennen ist.

#### 4.6.1 Manuelle Auswertung der Schwebung

Eine Manuelle Auswertung des Schwebungsinterferogramms wird trotz Schwierigkeiten so weit wie möglich durchgeführt. Die beiden Wellenlängen  $\lambda_{-}$  und  $\lambda_{+}$  werden wie zuvor bestimmt (vgl. 4.1). Für  $\lambda_{+}$  ein Werte von 275,6(3)  $\mu$ m bestimmt, indem über eine 1/4-Periode gezählt wurde. Für  $\lambda_{-}$  wurde ein Wert von 3,15(3)  $\mu$ m bestimmt. Mit den zuvor bestimmten Wellenlängen des Muffelofen und des Lasers ergeben sich die Werte in Tabelle 5.

Tabelle 5: Bestimmte Wellenlängen  $\lambda_{Laser,Muffelofen,+,-}$ 

$\lambda_{Laser}$	$3.372(9)  \mu \mathrm{m}$
$\lambda_{Ofen}$	$2.91(5)  \mu {\rm m}$
$\lambda_+$	$275.6(3)  \mu \mathrm{m}$
$\lambda_{-}$	$3.15(3)  \mu { m m}$

Die Parameter  $2\pi b_{Laser}$  und  $2\pi b_{Ofen}$  werden wie in Abschnitt 4.5 bestimmt, der Parameter a wird übernommen. Es ergeben sich die Werte in Tabelle 6.

Tabelle 6: Parameter für die spektrale Verteilung

a	0.0129(1)  mm
$2\pi b_{Laser}$	$1.863(5)\mu\mathrm{m}$
$2\pi b_{Ofen}$	$2.159(37)  \mu \mathrm{m}$

Mit den Werten aus Tabelle 6 ergibt sich die spektrale Verteilung in Abbildung 19.

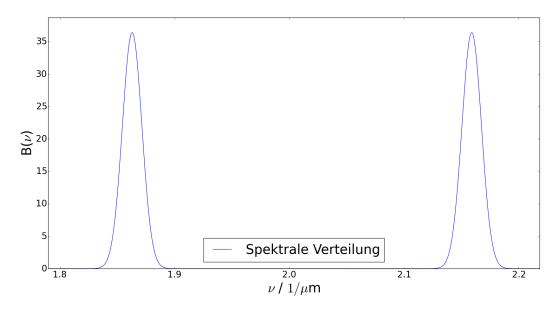


Abbildung 19: Spektrale Verteilung der Schwebung

#### 5 Fazit

Zu Beginn des Versuches wurde die Detektorspannung in Abhängigkeit der Chopperfrequenz bestimmt. Mit einem reduzierten Chiquadrat von 1,22 ist der lineare Fit an die logarithmierten Daten gut gelungen. Für den Rest des Versuches wurde eine Chopperfrequenz von 30 Hz verwendet. Im zweitem Teil sollte die Wellenlänge des Lasers und das Übersetzungsverhältnis für die Millimeterschraube bestimmt werden. Für den He-Ne-Laser wurde eine Wellenlänge von  $3.732(9) \,\mu\mathrm{m}$  bestimmt, welche relativ um  $10.08\,\%$  von der erwarteten Wellenlänge abweichte. Der Korrekturfaktor für das Übersetzungsverhältnis der Millimeterschraube wurde mit k = 5.42(1) bestimmt. Bei der Bestimmung des Weißlichtpunkts wurden unerwarteterweise zwei Weißlichtpunkte gefunden. Der erste Weißlichtpunkt wurde bei einer Schraubenposition von 4.7545(80) mm bestimmt, der zweite Punkt wurde bei 5.770(3) mm bestimmt. Nach der Theorie dürfte es nur einen Weißlichtpunkt geben. Die Herkunft des zweiten Weißlichtpunktes ist nicht bekannt. Da auch nicht hinreichend Zeit vorhanden war, um den Aufbau weiter zu untersuchen, können keine Vermutungen gemacht werden. Im vorletzten Teil sollte der Schmalbandfilter untersucht werden. Dafür wurde die Wellenlänge aus dem Interferogramm bestimmt. Für die Wellenlänge ergab sich ein Wert von  $2.91\,\mu\mathrm{m}$ . Dieser weicht relativ um ca. 12% von der erwarteten Wellenlänge 3.31  $\mu$ m ab. Der bestimmte Wert konnte durch Analyse mit FFT bestätigt werden. Die Breite des e<sup>-1</sup>-Abfalls des Wellenzahlspektrums wurde mit  $\Delta \lambda = 0.067(8) \,\mu$  m bestimmt und weicht um 12% von der erwarteten Breite (0.060  $\mu$ m) ab. Der theoretische Wert liegt innerhalb des Fehlers des experimentellen Wertes. Die halbe Breite des e<sup>-1</sup> Abfalls des Signals wurde mit a = 0.0129(1) mm bestimmt. Die Spektrale Verteilung des Schmalbandfilters ist in Abbildung 11 zu sehen. Im letztem Versuchsteil sollte die Eigenschaft der Schwebung untersucht werden. Mittels FFT konnten die beiden Wellenlängen  $3.392(12)~\mu m$  und  $3.31(2)~\mu m$ aus den Messdaten bestimmt werden. Diese entsprechen den Wellenlängen des Lasers und des

Muffelofens. Bei der manuellen Bestimmung der Schwebungswellenlänge ergab sich ein Wert von 275.6(3)  $\mu$ m. Die aus den Messdaten bestimmte spektrale Verteilung der Schwebung ist in Abbildung 19 zu sehen.

# 6 Anhang

#### 6.1 Weißlichtpunkt

Fit (Abbildung 20) und Parameter (Tabelle 7) für die Eichung des ersten Weißlichtpunktes.

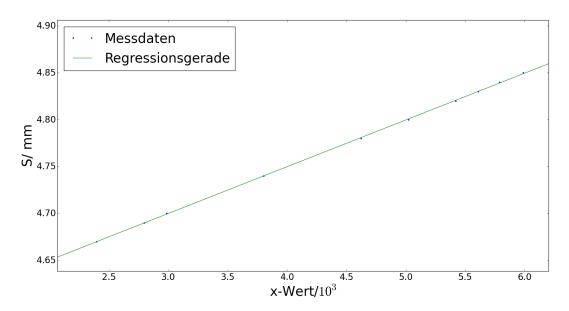


Abbildung 20: Erster bestimmter Weißpunkt bei 4,7545(80) mm

Tabelle 7: Parameter des Fits für den ersten Weißlichtpunkt

Parameter	Wert
A	4.986(19)e-05
В	4.5505(9)

Fit (Abbildung 21) und Parameter (Tabelle 8) für die Eichung des zweiten Weißlichtpunktes.

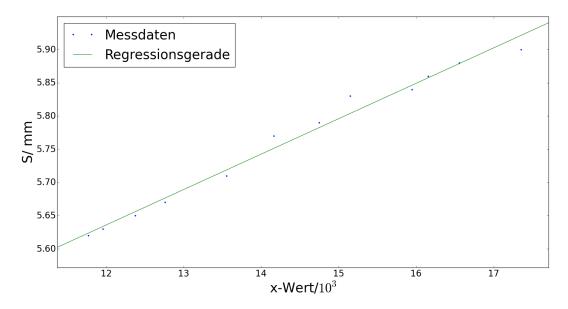


Abbildung 21: Zweiter bestimmter Weißpunkt bei 5,770(3) mm

Tabelle 8: Parameter des Fits für den zweiten Weißlichtpunkt

Parameter	Wert
A	5.33(21)e-05
В	4.996(30)

# 6.2 Weißlichtpunkt mit Schmalbandfilter

Fit für die Eichung des ersten Weißlichtpunktes mit Schmalbandfilter.

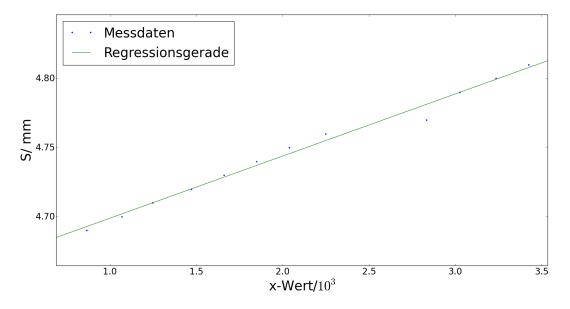


Abbildung 22: Erster bestimmter Weißpunkt bei  $4.7545(80)\,\mathrm{mm}$  mit Schmalbandfilter

Tabelle 9: Parameter des Fits für die Eichung mit Filter (f(x) = Ax + B)

Parameter	Wert
A	4.49(15)e-05
В	4.654(3)

## 6.3 Schwebung

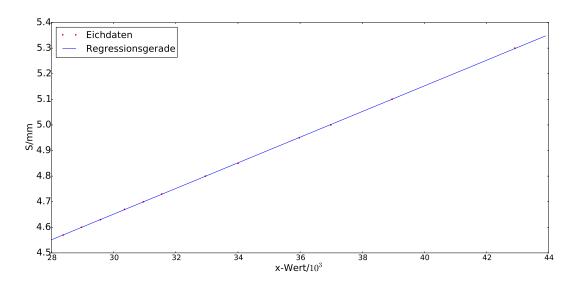


Abbildung 23: Eichung für die Schwebung mit einer Fitfunktion  $S(x)/\mu m = 5,010(8) \cdot 10^{-5} \cdot x + 3.1485(26)$ . Für die Berechnung des Fits wurde der Ursprung in den Schwerpunkt der Daten gelegt, um für den Fit unkorrelierte Fitparameter zu erhalten.

# Literatur

- [1] Aufbau des Experimentes. URL: https://moodle2.uni-wuppertal.de/pluginfile.php/231744/mod\_resource/content/1/Michelson-Anleitung\_2015-7.pdf (besucht am 06.10.2015).
- [2] U. Grupert. Staatsexamensarbeit: Aufbau eines Michelson-Interferometer-Versuchs. 1980.

  URL: https://moodle2.uni-wuppertal.de/pluginfile.php/223735/mod\_resource/

  content/2/Michelson-Staatsexamensarbeit\_Grubert-neu.pdf (besucht am 16.10.2015).

  Wuppertal.
- [3] Pyroelektrische Detektoren. URL: http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/3/anc/ir\_spek/ir\_geraete.vlu/Page/vsc/de/ch/3/anc/ir\_spek/ir\_spektroskopie/ir\_geraetetechnik/ir\_8\_2\_4/pyro\_m35ht0101.vscml.html (besucht am 08.10.2015).